

STRAUMANN® iEXCEL
**EMPOWERING
YOU TO EXCEL**



STRAUMANN® iEXCEL

BRILLIEREN SIE DURCH EXZELLENZ

Straumann® iEXCEL ist unser leistungsstarkes System für Dentalimplantate. Mit der Vielseitigkeit von vier Implantatdesigns in einem einzigen System. Und der Einfachheit einer gemeinsamen Prothetikverbindung. Integrierte digitale Workflows und Services, mit denen Sie Zeit sparen.

★ ECHTE KLINISCHE VIELSEITIGKEIT

Mit einem Instrumentenset für vier Implantatdesigns sind Sie in der Lage, stets die richtige Option zu wählen, die Herausforderungen der meisten Patientensituationen zu bewältigen und sich intraoperativ zu entscheiden. Die SLActive® Oberfläche ist eine exzellente Lösung selbst für Patient/innen, die durch Rauchen, Diabetes oder Strahlentherapie kompromittiert sind.

★ EINFACHHEIT, DIE SIE SCHÄTZEN WERDEN

Eine TorcFit™ Verbindung für alle vier Implantatdesigns mit einem Verbindungsdurchmesser für alle Prothetikkomponenten. Profitieren Sie von der prothetischen Einfachheit mit einem vollständigen Sortiment konfektionierter und individueller Original-Prothetikkomponenten von Straumann®.

★ VERNETZTE ZAHNMEDIZIN FÜR EXZELLENTLE LEISTUNGEN

Unser System bietet integrierte digitale Workflows und Services, konzipiert für vorhersagbare, effiziente und hochwertige Patientenergebnisse über das gesamte Indikationsspektrum von der Einzelzahnrestauration bis hin zur Full-Arch-Versorgung.




“
Es ist fantastisch, dass ich die
Implantatbettpräparation für TLX
und TLC Implantate parallel und
mit demselben Instrumentenset
durchführen kann. ”

Dr. Simone Janner, Oralchirurg, Schweiz



“
Auch wenn zwei
unterschiedliche Implantate
(TLX und TLC) gesetzt wurden
– die einheitliche Verbindung
vereinfacht meine Arbeit, das
begeistert mich. ”

Dr. Noemi Anliker, Fachzahnärztin für Prothetik, Schweiz

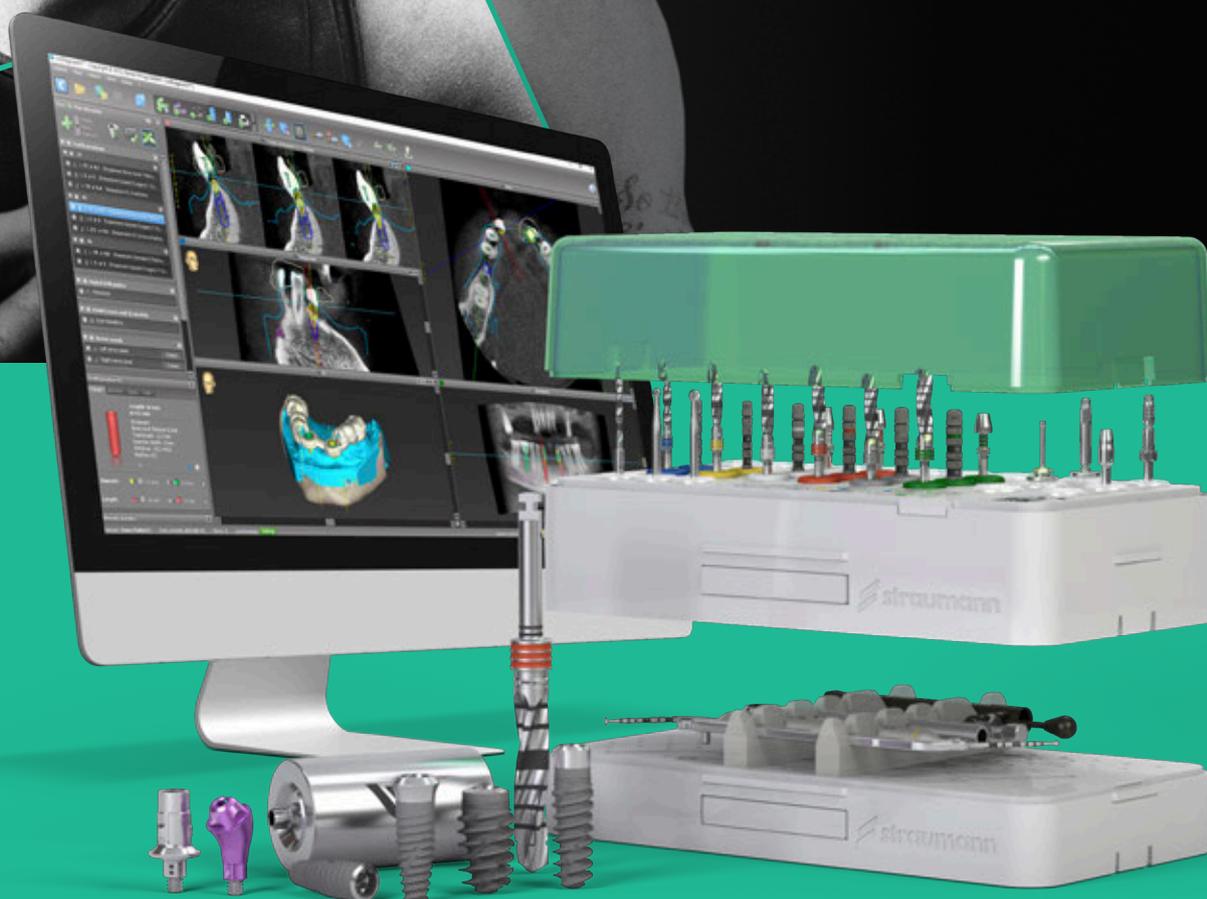

EIN-VIER-EINE

ECHTE KLINISCHE VIELSEITIGKEIT

* EIN INSTRUMENTENSET

Jetzt können Sie Ihre Implantatoption intraoperativ wählen. Ein gemeinsames Instrumentenset für alle vier Straumann® iEXCEL Implantatdesigns.

* VIER IMPLANTATDESIGNS

Decken Sie fast das gesamte Spektrum an Patientensituationen ab und meistern Sie Sofortversorgungsprotokolle mit vier Implantatdesigns in einem einzigen System.

BLX UND TLX: EXZELLENZ IN DER SOFORTVERSORGUNG


Unser einzigartiges Implantatdesign mit Dynamic Bone Management ermöglicht vorhersagbare Sofortversorgungsprotokolle selbst in herausfordernden Extraktionsalveolen, Defektstellen oder in weichem Knochen.

BLC UND TLC: SICHERHEIT FÜR ALLE INDIKATIONEN

Unsere apikal konischen Implantate der neuen Generation sind für weniger invasive Behandlungen, eine effiziente Implantatinsertion und hohe Primärstabilität konzipiert.

* EINE PROTHETIKVERBINDUNG

Dank der einheitlichen Prothetikplattform für alle Implantatdurchmesser können Sie Ihren Bestand an Prothetikkomponenten deutlich reduzieren.

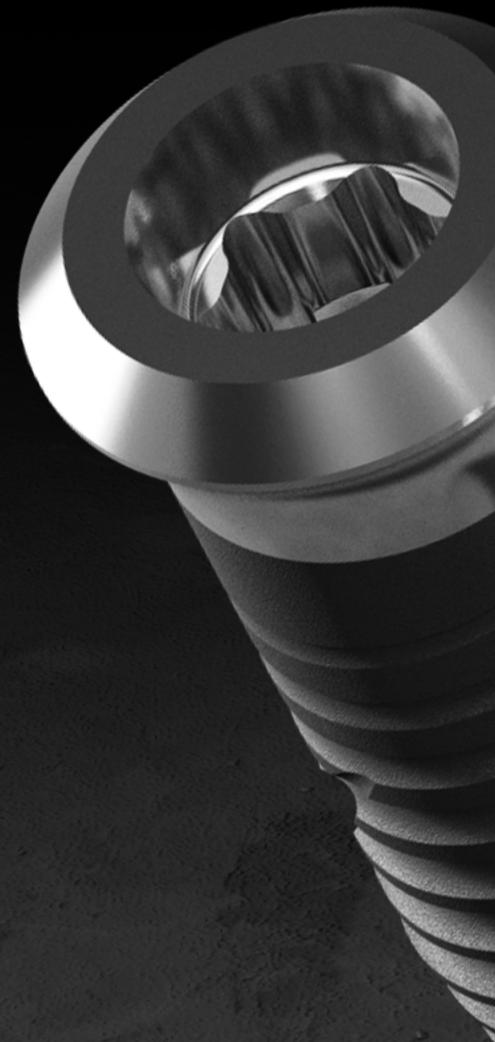




Implantate mit der **Straumann® SLActive®** Oberfläche erreichen selbst bei Patient/innen, die durch Rauchen, Diabetes oder Strahlentherapie kompromittiert sind, eine Implantatüberlebensrate von 100 %.¹⁻³



Die **Straumann® Roxolid®** Legierung ist stabiler als Titan und ermöglicht weniger invasive, knochenerhaltende Behandlungsoptionen mit kleineren und stabileren Implantaten.



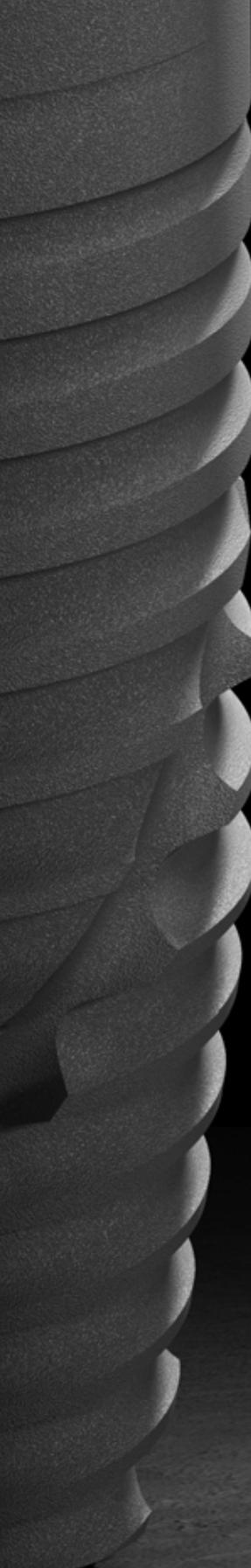

SICHERHEIT FÜR ALLE INDIKATIONEN

C-DESIGN

- Unsere apikal konischen Implantate der neuen Generation ermöglichen weniger invasive Behandlungen und sind für eine effiziente Implantatinsertion und hohe Primärstabilität optimiert.
- Die Implantate mit einem reduzierten Durchmesser von \emptyset 3,75 mm können an allen Zahnpositionen gesetzt werden, verringern die Invasivität und begünstigen den Knochenerhalt.
- Dank der verlängerten Schneidkanten ist kein Gewindeschneider erforderlich.

 **ABGEHEILTE
EXTRAKTIONSSALVEOLEN**

 **ENGE ZAHNZWISCHENRÄUME**

 **KONVENTIONELLE
PROTOKOLLE**

EXZELLENZ IN DER SOFORTVERSORGUNG

X-DESIGN

- Unser einzigartiges Implantatdesign mit Dynamic Bone Management ermöglicht vorhersagbare Sofortversorgungsprotokolle selbst in schwierigen Situationen.
- Die Verwendung von kurzen Implantaten, BLX 6 mm und TLX 4 mm, kann bei Kieferkämmen mit minimaler Knochenhöhe helfen, einen Sinuslift oder eine vertikale Augmentation zu vermeiden.
- Die Schneideigenschaften des Implantats sorgen für eine verbesserte Kontrolle der Ausrichtung bei der Implantatinsertion und helfen, eine optimale Positionierung zu erreichen.

*** EXTRAKTIONSALVEOLEN**

*** SOFORTVERSORGUNGSPROTOKOLLE**

*** SCHWIERIGE ANATOMISCHE SITUATIONEN**

CHOOSE.MIX.EXCEL

BONE LEVEL

Straumann® Bone Level Implantate sind für einen natürlich anmutenden Zahnersatz konzipiert. Dank Consistent Emergence Profiles™ für eine optimierte Weichgewebekonditionierung werden herausragende ästhetische Ergebnisse erreicht. Mit Straumann® iEXCEL stehen Ihnen jetzt zwei Bone Level Implantatdesigns zur Verfügung, mit denen Sie die meisten Patientensituationen intraoperativ meistern können.

Die BLC und BLX Implantate Ø 3,75 mm können an allen Zahnpositionen gesetzt werden, um den Knochenerhalt zu begünstigen und hochästhetische Ergebnisse zu erzielen.

BLC MERKMALE

- 1 PRÄZISE AUFBEREITUNG DES IMPLANTATBETTS**
Genau aufeinander abgestimmte Bohrer und Profilbohrer für eine präzise Aufbereitung des Implantatbetts.
- 2 KONISCHES DESIGN**
Erlaubt eine Unterpräparation des Knochens und gewährleistet eine hohe Implantatstabilität.
- 3 VERLÄNGERTE SCHNEIDKANTEN**
Dank der selbstschneidenden Eigenschaften ist kein Gewindeschneider erforderlich.
- 4 SCHLANKE IMPLANTATSPITZE**
Für Patient/innen mit anatomischen Einschränkungen; ermöglicht eine Knochenverdichtung in der unterpräparierten Osteotomie.



BLX MERKMALE

- 1 REDUZIERTER HALSDURCHMESSER**
Reduziert Spannungsspitzen im krestalen Knochen und erleichtert die subkrestale Implantatinsertion.
- 2 VARIABLES GEWINDEDESIGN**
Schmales und progressives Gewindedesign für hohe Implantatstabilität.
- 3 BIDIREKTIONALE SCHNEIDELEMENTE**
Ermöglichen eine verbesserte Kontrolle der Achsausrichtung während der Implantatinsertion für eine prothetikorientierte, optimale Positionierung.
- 4 TIEFES APIKALES GEWINDEDESIGN**
Grosse Verankerungsfläche für sofortigen Halt und verbesserte Stabilität.

	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm
BLC	✓		✓		✓		✓	✓
BLX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Längen	8–18 mm	8–18 mm	6–18 mm	6–18 mm	6–18 mm	6–18 mm	6–16 mm	6–16 mm

BLC IMPLANTAT

BLX IMPLANTAT

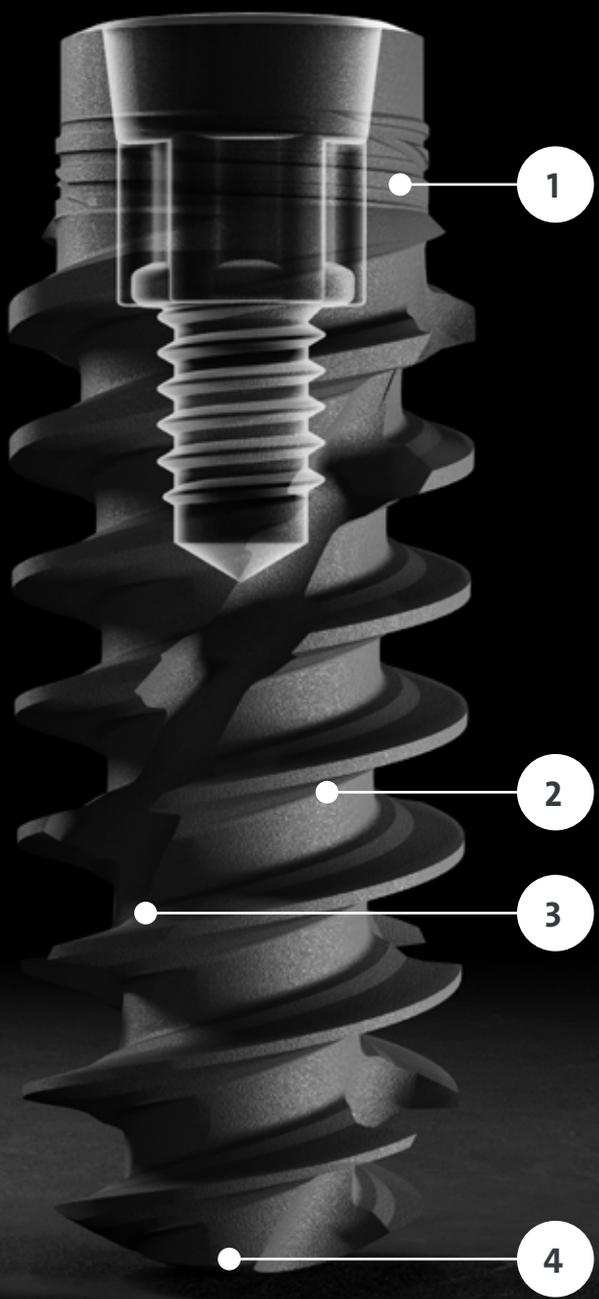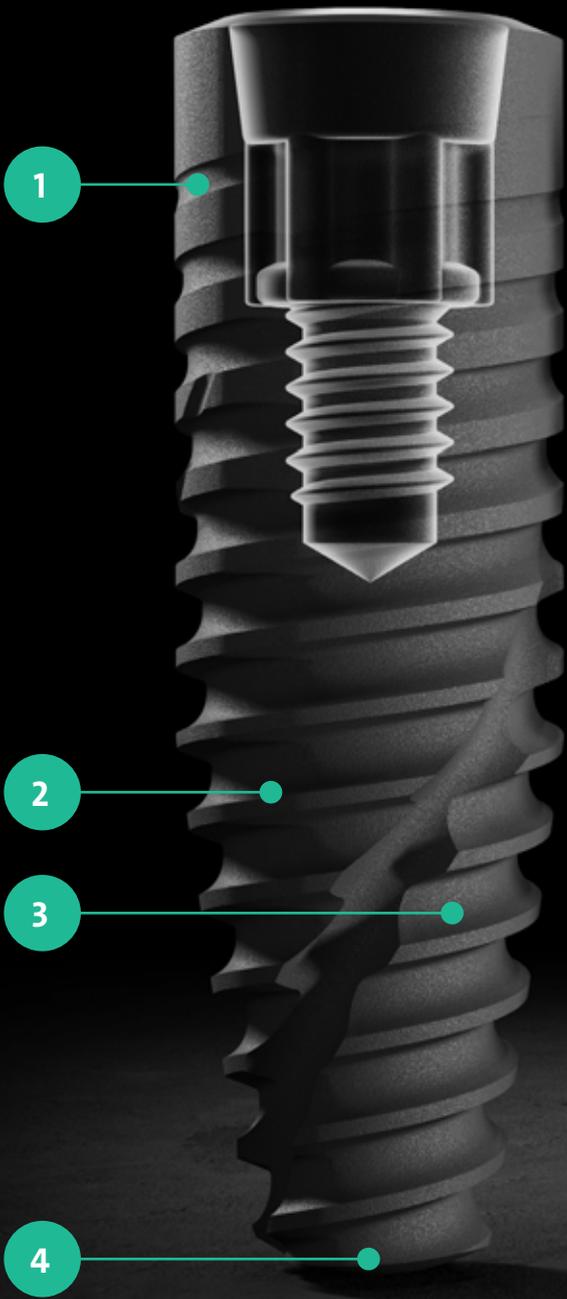

SLActive®
Roxolid®

CHOOSE.MIX.EXCEL

TISSUE LEVEL

Straumann® iEXCEL Tissue Level Implantate respektieren die biologischen Prinzipien der Hart- und Weichgewebeheilung. Durch die Verlagerung der Implantat-Sekundärteil-Schnittstelle weg vom Knochen wurde das Risiko für Entzündungen und Knochenresorption signifikant reduziert.⁴ Die oberhalb des Knochenniveaus liegende Prothetikplattform ermöglicht eine verbesserte Visualisierung und einen guten Zugang auch im Seitenzahnbereich.

Tissue Level Implantate sind eine gute Lösung für Patient/innen mit Parodontalerkrankungen in der Vorgeschichte.

TLC MERKMALE

1 PRÄZISE AUFBEREITUNG DES IMPLANTATBETTS

Genau aufeinander abgestimmte Bohrer und Profilbohrer für eine präzise Aufbereitung des Implantatbetts.

2 KONISCHES DESIGN

Erlaubt eine Unterpräparation des Knochens und gewährleistet eine hohe Implantatstabilität.

3 VERLÄNGERTE SCHNEIDKANTEN

Dank der selbstschneidenden Eigenschaften ist kein Gewindeschneider erforderlich.

4 SCHLANKE IMPLANTATSPITZE

Für Patient/innen mit anatomischen Einschränkungen; ermöglicht eine Knochenverdichtung in der unterpräparierten Osteotomie.

TLX MERKMALE

1 REDUZIERTER HALSDURCHMESSER

Reduziert Spannungsspitzen im krestalen Knochen und erleichtert die subkrestale Implantatinsertion.

2 VARIABLES GEWINDEDESIGN

Schmales und progressives Gewindedesign für hohe Implantatstabilität.

3 BIDIREKTIONALE SCHNEIDELEMENTE

Ermöglichen eine verbesserte Kontrolle der Achsausrichtung während der Implantatinsertion für eine prothetikorienteerte, optimale Positionierung.



4 TIEFES APIKALES GEWINDEDESIGN

Grosse Verankerungsfläche für sofortigen Halt und verbesserte Stabilität.

	Ø 3,3 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm
TLC	✓		✓		✓		✓	✓
TLX			✓		✓		✓	✓
Längen	8–18 mm	–	6–18 mm	–	6–18 mm	–	6–16 mm (TLC) 6–12 mm (TLX)	6–16 mm (TLC) 6–12 mm (TLX)

TLC IMPLANTAT

TLX IMPLANTAT

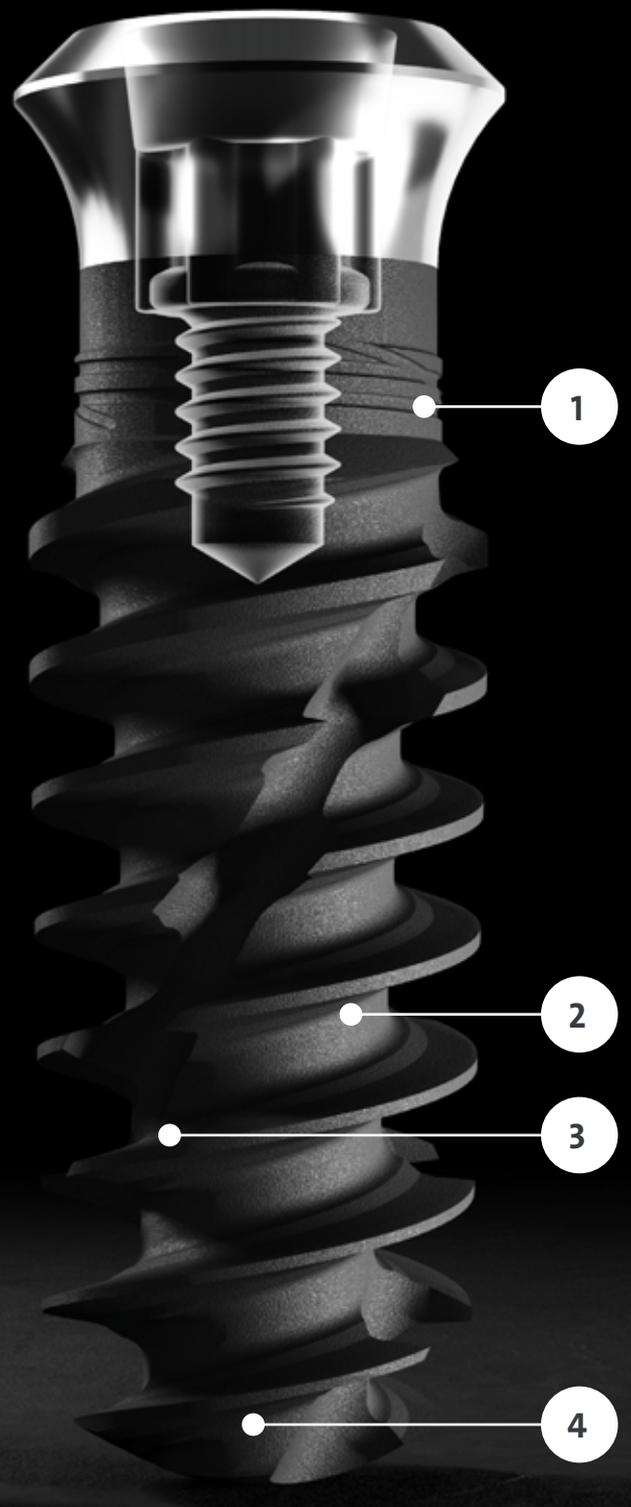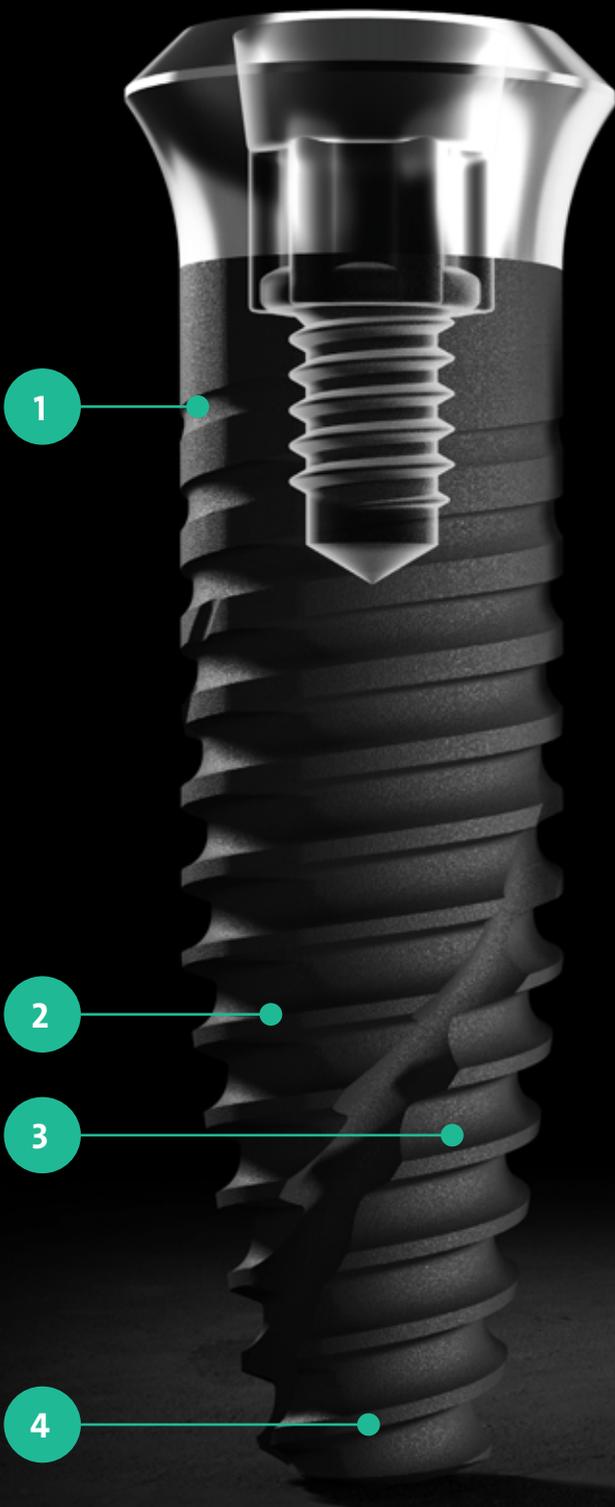

SLActive®

Roxolid®

MODULARE KASSETTE UND VELODRILL™ SYSTEM

EIN INSTRUMENTENSET

✱ STRAUMANN® MODULARE KASSETTE

Die Straumann® Modulare Kasette ist eine kompakte und individuell konfigurierbare Instrumentenkasette, sodass Ihnen stets die Instrumente und Werkzeuge zur Verfügung stehen, die Sie für ein bestimmtes Verfahren benötigen.

- A-Modul: für allgemeine und prothetische Instrumente
- B-Modul: für Workflows und Bohrer – ein Einsatz für alle iEXCEL Implantate
- C-Modul: Ergänzungsinstrumentarium für geführte chirurgische Verfahren (Handstücke) oder ein einfacher Behälter für Hilfsinstrumente

✱ STRAUMANN® VELODRILL™ FLEXIBLE. SIMPLE. COOL.

Mit dem VeloDrill™ System steht Ihnen ein gemeinsames Bohrer-Set für alle Straumann® iEXCEL Implantatdesigns zur Verfügung.

FLEXIBEL

Ein gemeinsames Instrumentarium für in Freihandtechnik durchgeführte und schablonengeführte Verfahren mit X- und C-Design-Implantaten.

EINFACH

Farbkodierte Bohrer für eine einfache Identifizierung der Durchmesser.

COOL.

Bohren mit geringer Wärmeentwicklung. Vermeidet eine Überhitzung der umliegenden Strukturen.



KEINE EINSCHRÄNKUNGEN. IHRE WAHL.

EINFACHHEIT, DIE SIE SCHÄTZEN WERDEN





“
Ich arbeite schon seit 5 Jahren mit BLX und kann sagen, dass die TorcFit™ Verbindung fantastisch ist – die Stabilität des Krestalen Knochens ist unübertroffen.”

Dr. Algirdas Puisys, Parodontologe, Litauen

TORCFIT™ VERBINDUNG

MIT DEN VORTEILEN EINES TORX-ANTRIEBS

- Ermöglicht die Übertragung von hohen Drehmomenten
- Sechs Positionen für die flexible Ausrichtung des Sekundärteils im Implantat

PRÄZISE PASSUNG DER KONISCHEN 7°-GRAD-VERBINDUNG

- Präzise Passung des Sekundärteils im Implantat
- Die Sekundärteilschraube greift nur im Implantat, wenn das Sekundärteil korrekt eingesetzt wurde
- Sicherer Halt des korrekt eingesetzten Sekundärteils dank Friktionspassung
- Hohe mechanische Stabilität und gute Belastungsverteilung

EINE PROTHETIKVERBINDUNG FÜR ALLE IMPLANTATE

- Ein Implantat-Eindrehwerkzeug für alle Implantate
- Reduzierter Bestand an Prothetikkomponenten
- Einfachere Lernkurve für Ihr Praxispersonal

EXZELLENZ MIT EINEM VOLLSTÄNDIGEN PROTHETIK-PORTFOLIO

ALLE INDIKATIONEN UND DIGITALEN WORKFLOWS.

Consistent Emergence Profiles™ über das gesamte Portfolio für eine vereinfachte Weichgewebekonditionierung in allen Indikationen.



STRAUMANN® VARIOBASE®



Unser Variobase® Portfolio ermöglicht effiziente Versorgung, ohne Ihre prothetische Flexibilität einzuschränken. Erhältlich mit abgewinkelten Schraubenkanal-Optionen und in verschiedenen Höhen für alle Indikationen, von Einzelzahnrestaurationen bis hin zu Full-Arch-Versorgungen. Die speziell konzipierte Rotationssicherung zeichnet sich durch eine vergrößerte Kleboberfläche für maximale Sicherheit aus.

INDIVIDUELLE PROTHETIK



Individuelle Prothetikkomponenten gewährleisten herausragende restaurative Ergebnisse; Form und Emergenzprofil der Sekundärteile werden patientenindividuell konstruiert. Verschraubte Stege und Brücken ermöglichen Winkelkorrekturen, um auch die schwierigsten Patientenfälle zu meistern.

VERSCHRAUBTE SEKUNDÄRTEILE FÜR BRÜCKEN UND FULL-ARCH-VERSORGUNGEN



Das glatte, gut reinigungsfähige und unterkonturierte Design verringert die Notwendigkeit einer Profilbohrung während des Verfahrens und schafft maximalen Raum für das intraorale Weichgewebe.

STRAUMANN® NOVALOC® RETENTIONSSYSTEM



Ausgezeichnete Beständigkeit und Langlebigkeit Ihrer herausnehmbaren Versorgungen dank reduzierter Reibung zwischen Sekundärteil und Matrize. Die 15° abgewinkelten Sekundärteile sorgen für eine verringerte einseitige Belastung und reduzieren den Verschleiss.

VORGEFRÄSTE SEKUNDÄRTEIL-ROHLINGE




Mit den vorgefrästen Sekundärteil-Rohlingen können Sie in Ihrem eigenen Labor einteilige individuelle Sekundärteile herstellen. Die präfabrizierte originale Straumann® Verbindung garantiert Präzision und Zuverlässigkeit.



VERNETZTE ZAHMEDIZIN

FÜR EXZELLENZ IN DER ZAHNHEILKUNDE

Integrierte digitale Lösungen vom Scannen bis hin zur prothetischen Versorgung, unterstützt durch unsere digitalen Innovationen.

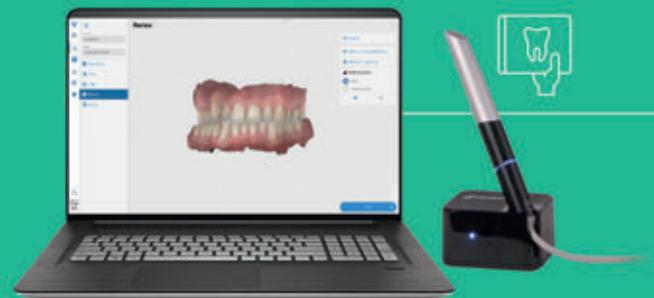

SMILE IN A BOX®

Entfalten Sie das Potenzial der geführten Implantatchirurgie. Von der Planung bis zur Behandlung: ein Instrument, eine Verbindung, ein Service-Team.

BRINGEN SIE IHRE PRAXIS AUF WACHSTUMSKURS

Implementieren Sie digitale Workflows ohne zusätzliche Investitionen, um Ihre Praxis mit maximaler Flexibilität auszubauen.

STEIGERN SIE DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT IHRER PRAXIS

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Praxis mit Sofortversorgungsprotokollen, Komplettlieferungen und flexiblen Workflows und entscheiden Sie von Fall zu Fall, welche Schritte Sie auslagern möchten.




smilecloud



REVEX™

Mit einem Full-Arch-Workflow, der alle Schritte von der provisorischen bis zur endgültigen prothetischen Versorgung umfasst, bietet RevEX™ Ihren Patient/innen mehr Komfort und weniger Behandlungstermine.⁵⁻⁷

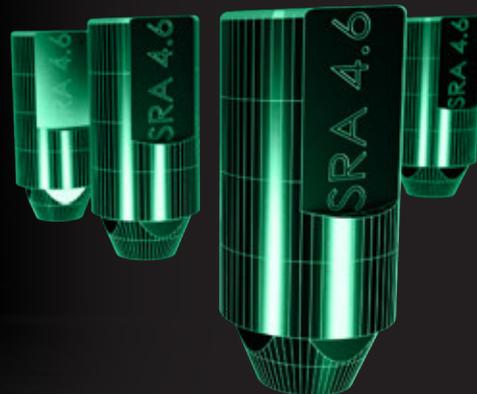

STRAUMANN® REGENERATIVE LÖSUNGEN

MEISTERN SIE ALLE HERAUSFORDERUNGEN

Gesunde und stabile intraorale Hart- und Weichgewebe sind eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg Ihrer Implantatbehandlungen. Straumann® Regenerative Lösungen wurden für die Regeneration der peridentalen und periimplantären Hart- und Weichgewebe entwickelt und sorgen für langfristige Funktion und Ästhetik. Sie stützen sich auf drei Säulen der zahnmedizinischen Behandlungsreise und decken das gesamte Spektrum von einfachen bis hin zu schwierigen Fällen ab.





ZAHNERHALT

Natürliche Zähne sind einzigartig. Unsere Lösungen zielen darauf ab, die natürlichen Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Eine unbehandelte Zahnfleischentzündung kann zu einer Parodontitis und potenziell zum Verlust der Zähne führen.

Straumann® Emdogain® ist ein integraler Bestandteil unserer Lösung zum Erhalt der natürlichen Zähne, unterstützt die wirksame Regeneration des Parodontiums und beschleunigt die Heilung.



MANAGEMENT DER PERIIMPLANTÄREN GEWEBE

Eine hinreichende Hart- und Weichgewebeförderung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Implantatbehandlung. Unsere Lösung beinhaltet ein umfangreiches Portfolio an Biomaterialien, die die Geweberegeneration unterstützen und optimale Bedingungen für das Setzen von Implantaten schaffen.



IMPLANTATERHALT

Gesunde periimplantäre Gewebe sind für den langfristigen Erhalt des gesetzten Implantats von entscheidender Bedeutung. Eine unbehandelte Zahnfleischentzündung kann zu einer Periimplantitis und potenziell zum Verlust des Implantats führen. Straumann® GalvoSurge® ist das Kernstück unserer Lösung. GalvoSurge® unterstützt die wirksame Regeneration der intraoralen Hart- und Weichgewebe und trägt so zum langfristigen Erhalt von Zahnimplantaten bei.

GALVOSURGE® DENTALIMPLANTAT- REINIGUNGSSET

- **Geschwindigkeit:** entfernt in nur 2 Minuten wirksam Biofilm von der Implantatoberfläche
- **Zuverlässigkeit:** schafft optimale Bedingungen für die Knochenregeneration
- **Sicherheit:** minimalinvasives Verfahren für die erfolgreiche Periimplantitis-Therapie ohne Implantatentfernung



EXZELLENZ AUS LEIDENSCHAFT

FÜR SIE UND IHRE PATIENT/INNEN

Mit Straumann erhalten Sie mehr als nur eine Lösung. Sie betreten eine Welt, die durch kontinuierliche und umfassende Innovation gekennzeichnet ist, in der die Patientenversorgung im Mittelpunkt steht und jedes Lächeln mit Sorgfalt, beispielloser Qualität und Verantwortung geschaffen wird. Sie werden Teil einer tief in der Wissenschaft verwurzelten Gemeinschaft und Mitglied in dem grössten Netzwerk von Zahnmediziner/innen und Dentaltechniker/innen, einem Netzwerk, in dem unternehmerische Werte fest verankert sind.

Als die führende Marke der weltweit grössten Gruppe von Implantatherstellern ist Straumann® ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für ein breites Spektrum zahnmedizinischer Spezialgebiete. Mit unseren fortschrittlichen Lösungen verschieben wir kontinuierlich die Grenzen von zahnmedizinischen Behandlungen und unterstützen zukunftsorientierte Zahnärzte und Zahnärztinnen.

- 
- ✓ **TRANSFORMIERENDE INNOVATION**
 - ✓ **UNTERNEHMERISCHE ZUVERLÄSSIGKEIT**
 - ✓ **WISSENSCHAFTLICHE EVIDENZ**
 - ✓ **GRÖSSTE GLOBALE COMMUNITY**
 - ✓ **VORREITER BEI SCHULUNGEN UND KURSEN**
 - ✓ **ERSTKLASSIGE SCHWEIZER INGENIEURSKUNST**

ERSTKLASSIGE LÖSUNGEN, SYSTEME UND SERVICES

Straumann® iEXCEL ist die bahnbrechende Verkörperung unseres innovativen Mindsets und vereint die besten und neuesten Entwicklungen in einem umfassenden System. Dieses System deckt unterschiedliche Disziplinen wie Implantologie, Prothetik, Regeneration und digitale Lösungen ab und integriert das Beste aus allen Bereichen.

Wir bieten Ihnen nicht einfach eine Palette an eigenständigen Produkten, sondern liefern ganzheitliche Systeme und Lösungen. Indem wir die Ergebnisse unserer beispiellosen Materialforschung in unsere Lösungen für Implantologie, Regeneration und Prothetik einfließen lassen, integrieren wir wegweisende Technologien, um nahtlos ineinander greifende digitalisierte Prozesse zu garantieren.

Unser bedingungsloses Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation wird durch unser Engagement für digitale Transformation und den strategischen Einsatz von künstlicher Intelligenz gestützt und gestärkt, elementare Komponenten für die Entwicklung von digital integrierten Behandlungskonzepten via offene Plattformen. Dieser Ansatz ermöglicht uns, die immer neuen und sich kontinuierlich verändernden Anforderungen in der fachzahnärztlichen Praxis zu antizipieren und zu erfüllen.

IMPLANTATSYSTEME FÜR ALLE INDIKATIONEN UND BEHANDLUNGSPRÄFERENZEN



Roxolid®



SLActive®

UMFANGREICHES PROTHETIK- PORTFOLIO UND UMFASSENDE WORKFLOWS





REGENERATIVE LÖSUNGEN



QUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG



DIGITAL SOLUTIONS



DENTALE COMMUNITY

ENGAGIERT UND VERNETZT

Wir sind der weltweit führende Partner einer Vielzahl von einzigartigen Communitys in der Dentalbranche, die sich zu beruflicher Qualifikation, Weiterbildung und wissenschaftlicher Evidenz mit dem Schwerpunkt auf Patientenergebnissen bekennen und durch Partnerschaften miteinander verbunden sind, die auf hohen ethischen Grundsätzen basieren.



WISSENSCHAFT UND KLINISCHE PRAXIS

In der streng regulierten Welt der Medizintechnik basiert unsere herausragende klinische Glaubwürdigkeit auf strikter Compliance, unzähligen veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten und der Unterstützung des International Team for Implantology (ITI). Durch kontinuierliche Zusammenarbeit, Forschung und Unterstützung bekräftigen wir unser Bekenntnis zu langfristigen Partnerschaften innerhalb der Dentalbranche.



WISSENS- UND KOMPETENZERWERB

Unsere technisch fortschrittlichen Lösungen werden durch erstklassige Schulungen und Kurse und Experten-Services ergänzt. Wir haben Hunderttausende Fachkräfte geschult und bieten über mehr als 100 verbundene Unternehmen auf der ganzen Welt kompetente und persönliche Services an. Unser Fokus auf Qualifikation und Services hilft unseren Partnern, vorhersagbare Ergebnisse zu erzielen und eine hohe Patientenzufriedenheit zu erreichen.

ERSTKLASSIGE AUS- UND FORTBILDUNG

VORAUSSETZUNG FÜR EXZELLENZ

Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine unverzichtbare Voraussetzung für effektive Patientenbehandlungen und Praxiswachstum. Darum ist unser Bekenntnis zu kontinuierlichem Wissens- und Kompetenzerwerb tief in unserer Unternehmens-DNA verankert.

Wir bieten eine Vielzahl von unterschiedlichen Formaten wie Präsenzs Schulungen, eLearning-Kurse, Webinare, dedizierte digitale Plattformen usw. an. Mit unseren Programmen inspirieren wir Hunderttausende Dentalfachkräfte auf der ganzen Welt. Wir bieten, fördern und unterstützen erstklassige Schulungen und Formate, die weit über rein produktbezogene Angebote hinausgehen. Bei Straumann® spielt der medizinische Wissens- und Kompetenzerwerb eine zentrale Rolle, und wir arbeiten eng mit dem ITI zusammen. Unsere Investitionen in wegweisende Lerntechnologien, Produkte und Methoden wie beispielsweise Virtual Reality- und KI-basierte Anwendungen spiegeln dies wider. Wir entwickeln innovative Lösungen mit dem Potenzial, den zahnmedizinischen Wissens- und Kompetenzerwerb zu revolutionieren.

- Massgeschneiderte Straumann® Schulungsplattform
- Tausende Vor-Ort- und Online-Schulungen und Kurse
- Zertifizierte Schulungsprogramme für Einsteiger und fortgeschrittene Anwender
- Auf Virtual Reality und Augmented Reality basierende Technologien
- Weltweit 30 Zentren für zahnmedizinische Aus- und Fortbildung (CoDE)
- Einzigartiges Women Implantology Network (WIN) mit mehr als 4.000 registrierten Teilnehmerinnen
- Young Professional Programs (YPP) für Talente





LITERATUR

1 Alsahhaf A et al. Survival of Titanium-Zirconium and Titanium Dental Implants in Cigarette-smokers and Never-smokers: A 5-Year Follow-up. *Chin J Dent Res.* 2019;22(4):265-272 **2** Cabrera-Domínguez JJ, Castellanos-Cosano L, Torres-Lagares D, Pérez-Fierro M, Machuca-Portillo G. Clinical performance of titanium-zirconium implants with a hydrophilic surface in patients with controlled type 2 diabetes mellitus: 2-year results from a prospective case-control clinical study. *Clin Oral Investig.* 2020 Jul;24(7):2477-2486 **3** Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. *J Oral Rehabil.* 43: 871-872 **4** Derks J, Schaller D, Hakansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. *J Dent Res.* 2016 Jan; 95(1):43-9. **5** Panos Papaspyridakos, Armand Bedrossian, Yukio Kudara, Panagiotis Ntovas, Abdullah Bokhary, Konstantinos Chochlidakis. Reverse scan body: A complete digital workflow for prosthesis prototype fabrication. *Journal of Prosthodontics*, 2022 **6** E. Armand Bedrossian DDS, MSD, FACP, Panos Papaspyridakos DDS, MS, PhD, Edmond Bedrossian DDS, FACOMS, FAO, FITI "The Reverse Scan Body protocol": Completing the Digital Workflow, *Compendium* June 2023 (will be published in August) **7** Vandeweghe S, Vervack V, Dierens M, De Bruyn H. Accuracy of digital impressions of multiple dental implants: an in vitro study. *Clin Oral Implants Res* 2016;28:648-53.

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Distributor Deutschland

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Straße 21
D-79100 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
www.straumann.de

© Institut Straumann AG, 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

Diese Broschüre dient zu Informationszwecken und ist für den Gebrauch in verschiedenen Ländern bestimmt. Jedes Land ist eigenverantwortlich für die Konformität des Inhaltes mit den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften zuständig.

